SAINTE AGATHE DES MONTS

Guide d'utilisation
Lugicap

Une chaise roulante est disponible sur demande, au besoin.


Il est recommandé aux usagers de porter un casque protecteur, et à l'accompagnateur de porter des patins ou des crampons.

1 Ajustement



1.1 Mesurer la largeur du fauteuil


- Utilisez le compas pour mesurer la largeur extérieure des roues, près du sol.

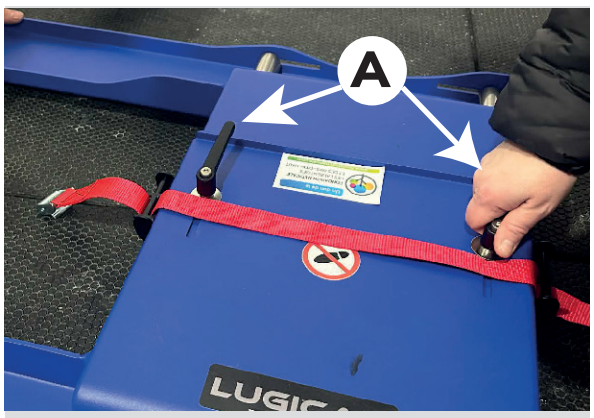

1.2 Ajuster la largeur

- Desserrez les deux poignées (A).
- Ajustez la largeur du Lugicap pour qu'elle corresponde à la mesure du compas.
- Resserrez les poignées fermement.


Le réglage est bon lorsque les roues du fauteuil touchent légèrement les parois internes du châssis, sans jeu.

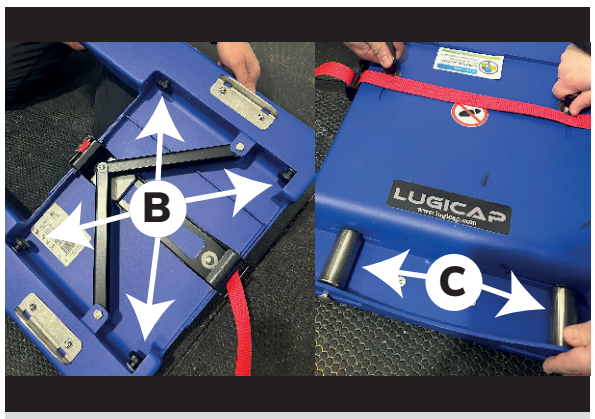

1.3 Ajuster les butées de sécurité


- Desserrez les molettes (B) sous le châssis.
- Placez les butées (C) de manière à immobiliser les roues sans qu'elles bougent du tout.
- Resserrez les molettes (B) au maximum.

2 Embarquement du fauteuil roulant

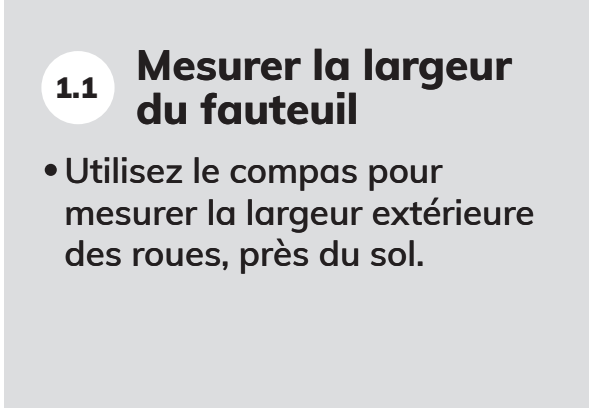


- L'accompagnateur place le fauteuil, dos vers l'avant du Lugicap, sur la glace.
- Basculez doucement le fauteuil sur ses grandes roues arrière.
- Reculez pour le déposer dans l'équipement.
- Placez les roues entre les butées.

3 Installer la sangle de sécurité

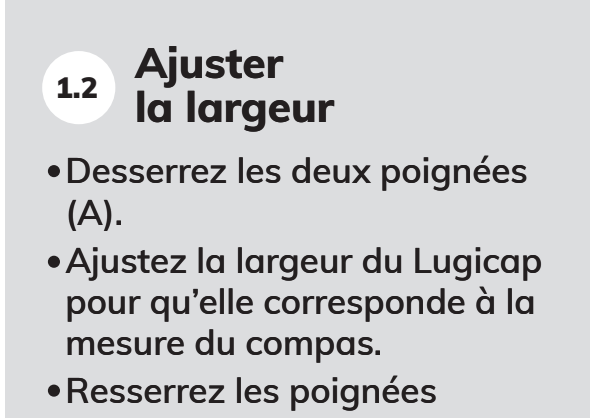

- Passez les deux parties de la sangle au-dessus du tube sous l'assise du fauteuil.
- Passez le brin sans boucle dans le passant arrière de la luge, puis dans la boucle de la sangle.
- Tirez vers le bas pour bien tendre.
- Attachez l'excédent de sangle pour éviter qu'il gêne le déplacement.

4 Débarquement du fauteuil

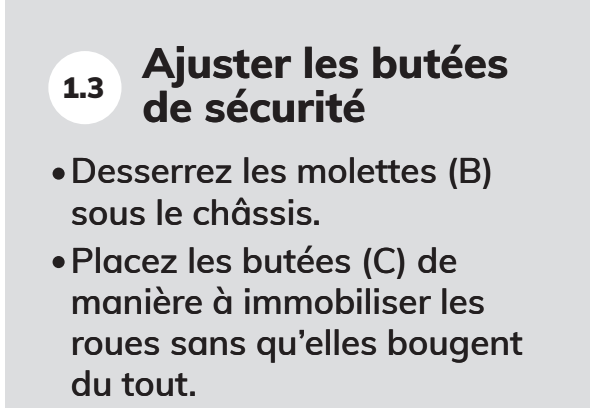

- Immobilisez le Lugicap.
- Retirez la sangle.
- Soulevez légèrement le fauteuil par les poignées pour sortir les roues des butées.
- Basculez sur les roues arrière et débarquez doucement.